
Neomounts®

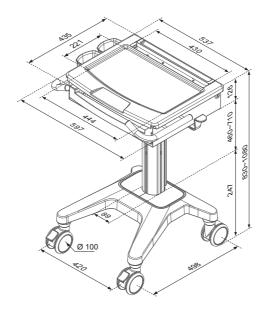

Measuring unit: mm

MED-M200

NL Medische steun

DE Medizinische Halterung

FR Support médical

IT Supporto medico

ES Soporte médico

PT Suporte medico

DK Medicinsk beslag

NO Medisinsk feste

SE Medicinskt fäste

FI Medical teline

PL Uchwyt medyczny

CS Držák pro lékařské účely

SK Držiak na lekárske vybavenie

RO Suport medical

Neomounts

MED-M200



INDEX

Parts Features p. 3 Step 1-2-3 Step 4-5-6 p. 5 Step 7-8 Adjustment and operation p. 7 Safety notes Maintainance p. 10



PARTS






























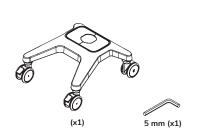









FEATURES

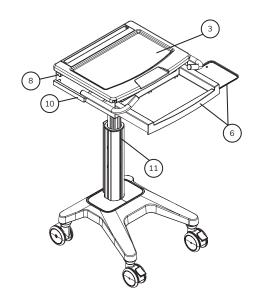


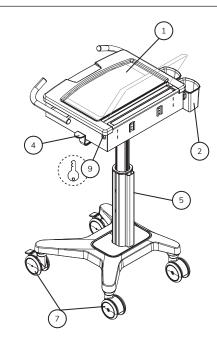



FEATURES


- 1. Laptop compartment
- 2. Storage basket
- 3. Work surface
- 4. Lift brake release (release brake to raise or lower the cart)
- 5. Cable management
- 6. Sliding keyboard tray with mouse holder and sliding mouse tray (to accomodate both right and left hand users)
- 7. Casters (2 rear non-locking and 2 front locking)
- 8. Latch
- 9. Key and lock hole
- 10. Hanger for accessories
- 11. Track for accessories mounted


ADJUSTMENT DIRECTION

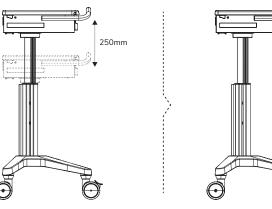


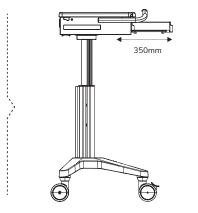


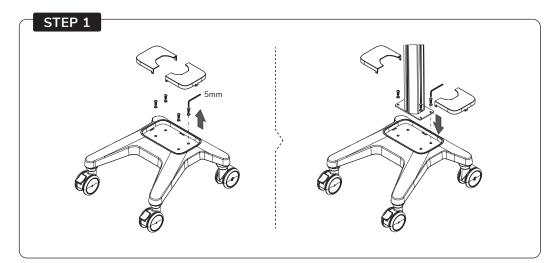


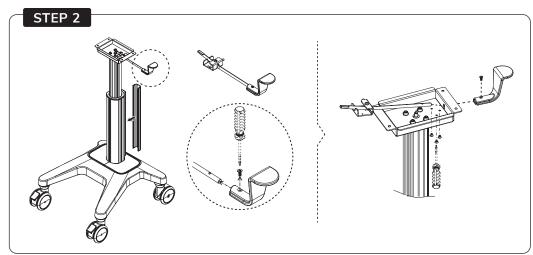


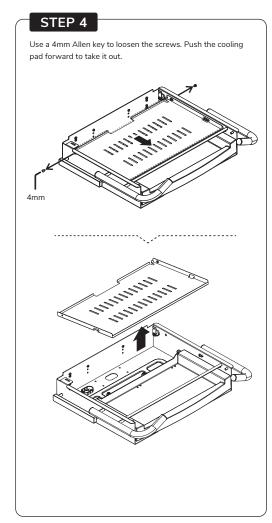

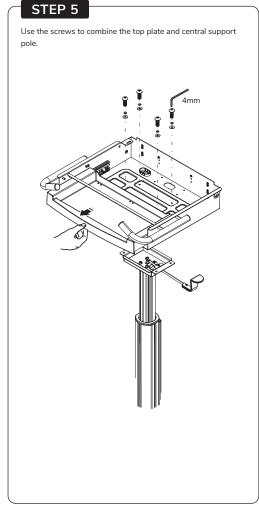

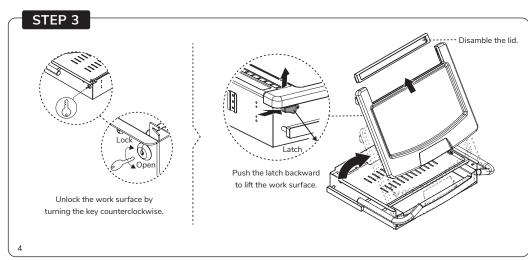


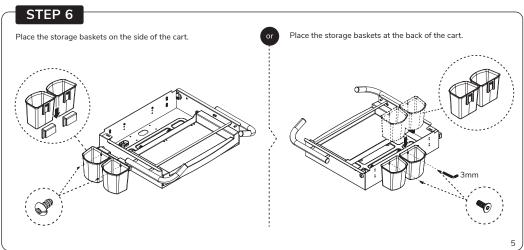

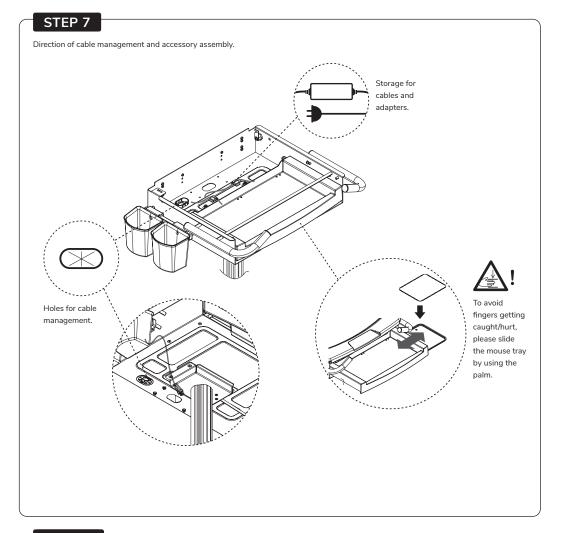


STEP 8

Put the cooling pad back in place and fasten the screws by using a 4mm Allen key.

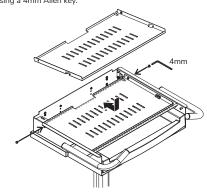

Place the laptop in the compartment and put the work surface back in place. Please notice the work surface must be locked and the latch must be pushed forward before moving this cart.

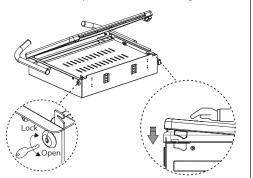


ADJUSTMENT AND OPERATION



In case of cart damage, do not adjust the lift mechanism with an empty cart, since this may cause the work surface to rise too quickly.

Notice:

Make sure to put a hand on both sides of the work surface while releasing the brake to higher or lower the work surface, as shown in the figure. Do not push the center of the work surface to lower the height. When raising the work surface, use two hands to slightly lift the surface if it remains motionless.

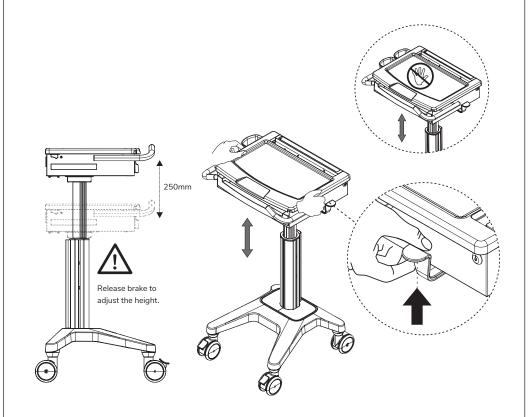



.


SAFETY NOTES

WARNING

Please notice that the latch must be pushed forward after placing back the work surface.

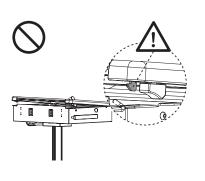


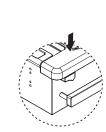


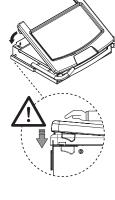

WARNING


When moving the cart over an irregular surface or thresholds, please lift the cart from the bottom of the keyboard compartment, as shown in the figure. Do not lift the cart from the handles.

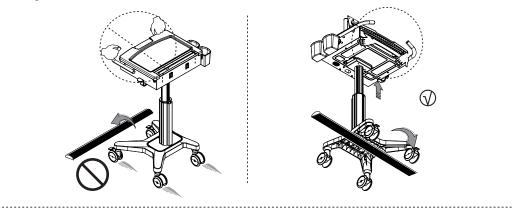


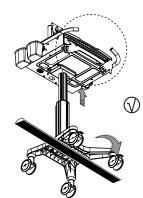

WARNING


When the cart is in its place/not moving, make sure to put the brake on the two front caster wheels.

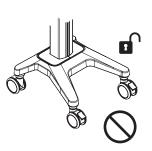

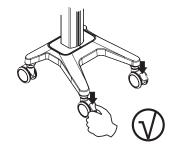

WARNING

Hold the work surface on both sides while releasing the brake to higher/lower the work surface, as shown in the figure. Do not push the center of the work surface to lower the height. When raising the work surface, use two hands to slightly lift the surface if it remains motionless.

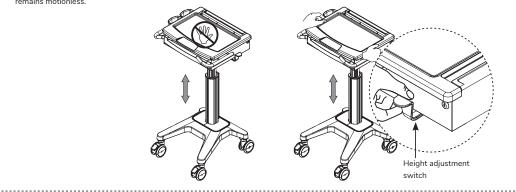

WARNING

Please do not apply pressure to the work surface, especially not in the center area, except when adjusting the height.



MAINTENANCE

All cart maintenance must be carried out at least once a month by a professional technician.

Cleaning warning

Because the cart is in the environment of electrical equipment, the usage of inflammable cleansers are strictly forbidden.

- 1. Before cleaning the cart, please make sure the cart is unplugged from the mains and switched off.
- 2. Please ensure the cart is entirely dry before plugging the power into the socket.
- 3. While cleaning the cart, please use a damp cloth to wipe off the superficial cleansers until completely dry.
- 4. The cart is not to be used in a moist environment and liquids have to be avoided from running into the cart.
- 5. To avoid the finishing of the surface being damaged, do not use any abrasive materials for cleaning.
- 6. Before using any cleanser on the cart, please test them on a small part to see whether it affects the surface or not.

Please note that these guidelines give no guarantee whatsoever in terms of infection control. Kindly consult your medical infection control specialist for cleaning advice.

Cleaning recommendations

- 1. Please use non-abrasive or diluted products such as soap water and diluted alcohol to clean the plastic components.
- 2. In case of spots of pen or maker on the cart's surface, a soft cloth with 91% isopropyl alcohol is suggested for cleaning.
- 3. In cased of iodine spots on the cart's surface, a soft cloth with soap water or diluted alcohol is suggested for cleaning.

The following chemicals are strictly forbidden for cleaning the cart: Abrasive cleansers, acetone, mineral spirits, paint thinner or any other harsh or toxic chemicals.

Inspections

All cart inspections must be carried out at least once a month by a professional technician.

In case of faults or damage occurring, stop operating the cart and contact your distributor for further assistance.

Casters

To allow the cart to move as intended, please inspect the casters regularly and keep the cart away from damaged and irregular surfaces.

Fastener

If fasteners/ screws become loose and need to be tightened, do not overtighten them. Overtightened fasteners/ screws might not only cause damage to the screws but also to the components.

Troubleshooting

The cart is difficult to move

Ensure the two front locking casters are not locked. Check if any debris is sticking to casters and remove it.

The cart is difficult to adjust in height

Ensure the lift brake is pressed completely and lift the work surface slightly, to prevent the work surface to rise too quickly. If the lift mechanism still doesn't work, please contact your distributor for further assistance. Also contact your distributor for assistance if the lift mechanism keeps going up automatically.

Neomounts

- To ensure safety, please read this manual carefully before installation and follow the instructions. Store this manual in a secure place for future reference.

 The manufacturer shall not be legally responsible for any equipment damage or personal injury caused by incorrect installation or operation or their than that covered in this manual.

 The mount is designed for easy installation and removal. The manufacturer shall not be liable for damage to equipment or personal injuries arising out of human factors or acts of nature, such as earthquake or typho its recommended that the mount be installed by qualified personnel only.

- At least two persons are needed to install or remove the product to avoid hazard of falling objects Please carefully input are where the area where this to be installed to the control of the control o

- Do not install the product near air conditioning vents or areas with excess dust and fumes
- Only install on vertical walls and avoid slanted surfaces.
 Do not install in place subject to any shock or vibration.
 Do not install in places subject to direct exposure to bright light, as it may cause eye fatigue when viewing the display panel.
- Maintain sufficient space around the display to a source document of maintain places.
 Maintain sufficient space around the display to a source adequate ventilation.
 To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
 To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
 To ensure safe installation, first check the structure of the wall, ceiling or floor and select a secure mounting location.
 To be mounting or floor should be strong enough to sustain a weight of at least four times of the display and mount combined. The mounting location must be able to withstand earhquake or other strong shock.
 Do not modify any accessories or use broken parts. Contact your dealer with any questions.

- 11. Tighten all screws (do not exert excessive force to avoid breaking the screw or damaging its thread).
 12. Drill holes and bolts will be left in the wail, ceiling or foor once the display and bracket are removed. Stains may occur after extended use.
 13. Since the manufacturer has no way to control well, ceiling or floor type and installation of the mount, the warranty of the product shall only cover the body of the mount. The warranty period of the product is 5 years. 14. Please consult the English language manual for any dispute on conditions.

DE /!\ VORSICHT

- Um die Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit Sie später off die anteriere zu gewannessen, iesen die dieses Handbuch von die installadunt sorgrandig durch die derogen die die Anweisungen, dewanten die dieses Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit die darauf zurückgreifen können.
 Der Hersteller ist rechtlich nicht verantwortlich für Geräteschäden oder Personenschäden, die durch eine andere als die in diesem Handbuch beschriebenen Installation oder Bedienung verursacht werden.
- Das Produkt ist für eine einfache Installation und Demontage ausgelegt. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Geräten oder Personenschäden, die durch menschliche Faktoren oder Naturereignisse wie Erdbeben
- oder Taifun verursacht werden. Es wird empfohlen, das Produkt nur durch qualifiziertes Personal zu installieren
- Es wird empfonlen, das Produkt nur durch quaintziertes Personal zu installation und de Gefahr von herabfallenden Gegenständen zu vermeiden. Bitte überprüfen Sie den Bereich, in dem das Produkt installiert werden soll sorgfältig:

 Vermeiden Sie Ort die hohen Temperaturen, Feurchigkeit oder Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind.

 Installieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Lüftungsschiltzen von Klimanalagen oder Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.

 Installieren Sie das Produkt nicht an eine vertikale Wand, Vermeiden Sie schräge Oberflär Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.

 Installieren Sie das Produkt nicht an eine vertikale Wand, Vermeiden Sie schräge Oberflär Bereichen mit übermäßigem Staub und Rauch.

- Nicht an Orten installeinen, die Erschütstungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
 Nicht an Orten installeinen die Erschütstungen oder Vibrationen ausgesetzt sind.
 Nicht an Orten installeinen die direkter Sonneneinstrahlung bzw. zu starkem Licht ausgesetzt sind, da dies beim Betrachten der Bildschirmanzeige zu Ermüdung der Augen führen kann.
 Sorgen Sie für ausreichend Platz um das Display, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
 Um die Sicherheitz zu gewährleisten und Unfalle zu vermeiden ist en notwendig von der Installation die Wand-, Decken- oder Bodenstruktur zu überprüfen und eine sichere Stelle auszuwählen.
- 9. Die Oberfläche, Wand, Decke oder der Boden sollten stark genug sein, um ein Gewicht von mindestens dem Vierfachen des kombinierten Displays und des Montagesets zu tragen. Der Montageort muss Erdbeben oder anderen starken Erschütterungen stand halten können.

 10. Modifizieren Sie kein Zubehör und verwenden Sie keine beschädigten Teile. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Händler.
- 11. Ziehen Sie alle Schrauben fest (übern Sie keine übermäßige Kraft aus, um ein Brechen der Schraube oder eine Beschädigung des Gewindes zu vermeiden).
 12. Nach dem Entfreum eine Sproduktes können Löcher und Schrauben in Wand, Decke oder Boden verbleben. Nach längerem Gebrauch können Flecken auftreten.
 13. Der Hersteller hat keinen Enfilms auf die Wand. Decken- oder Bodenart und die Installation der Halterung. Deshalb deckt die Garantie des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Produkt selbst ab. Die Garantiezeit des Produktes nur das Pr
- Bei Streitigkeiten über die Bedingungen ziehen Sie bitte das englischsprachige Handbuch hinzu.

FR ! ATTENTION

- Pour assurer la sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant l'installation et suivre les instructions. Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour un besoin ultérieur.
 Le fabricant ne sera pas légalement responsable de tout dommage à l'équipement ou de blessure corporelle causé par une installation ou une utilisation incorrecte autre que celles préconisées dans ce manuel
- Le produit est conçu pour une installation et un démontage faciles. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages à l'équipement ou des blessures corporelles résultant de facteurs humains ou d'actes de nature, tels qu'un ternbliement de terre ou un typhon.
 Il est recommandé que le produit soit installé uniquement par du personnel qualifié.
 Au moins deux personnes sont hécessaires pour intestier ou démontre le produit afin d'éviter tout risque de chute d'objets.
- - Veuillez inspecter soigneusement la zone où le produit doit être installé:

 Evitez les endroits soumis à des températures élevées, à l'humidité ou au contact avec de l'eau.

 N'installez pas le produit à proximité de bouches de climatisation ou de zones avec un excès de poussière et de fumées.
 - Installez uniquement sur des murs verticaux et évitez les surfaces inclinées.
- No nas installer dans des endroits soumis à des chocs ou des vibrations
- Ne pas instante utils use sentroits sourins à use cincio sui des Windustons.
 Ne l'installez yos dans des endroits sourins à une exposition directe à la lumière vive, car cela peut provoquer une fatigue oculaire lors de la visualisation des écrans d'affichage
 Maintenez un espace suffisant autour de l'écran pour assurer une ventilation adéquate.
 Pour garantir une installation sive, vérifiez d'abord la structure de la surface, du mur, du plafond ou du sol et sélectionnez un emplacement de montage sécurisé.
- La surface, le mur, le platond ou le sol doivent être suffisamment solides pour supporter un poids d'au moins quatre fois l'écran et le produit combinés. L'emplacement de montage doit pouvoir résister aux tremblements de terre ou à d'autres chocs violents.

 Ne modifie au una accessiore et n'utilisez pas de pièces cassées. Contactez votre revendeur pour toute question à ce sujet.
- 11. Serrez toutes les vis (n'exercez pas de force excessive pour éviter de casser les vis ou d'endommager leur filetage).
- 12. Des trous et des boulons peuvent être laissés dans le mur, le plafond ou le sol une fois le produit retiré. Des taches peuvent apparaître après une utilisation prolongée.

 13. Étant donné que le fabricant ne peut pas vérifier / superviser la qualité de la surface / du mur, du plafond ou du sol, ni la qualité d'installation du produit, la garantie du produit ne couvre que le produit lui-même, et non le fonctionnement du produit. La péridoe de garantie du produit est de 5 ans.
- Veuillez consulter le manuel pour tout différend sur les conditions.

III ATTENZIONE

- Per garantire la sicurezza, leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e seguire le istruzioni. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri.
 Il produttore non sarà legalmente responsabile per eventuali danni alle apparecerbitature o lesioni personali causati di antisallazione o funzionamento non corretti diversi da quelli descritti nel presente manuale.
 Il produto è propetato per una facile installazione o rimozione. Il produttore non è responsable per danni alle apparecchiature o lesioni personali derivanti da fattori umani o atti di natura, come terremoti o tifoni.
- Si consiglia di installare il prodotto solo da personale qualificato.
 Per installare o irmuovere il prodotto sono necessarie almeno due persone per evitare il rischio di caduta di oggi Ispezionare attentamente l'area in cui il prodotto deve essere installato:
- - ispezionale acterialmente l'area in cui producto deve essere inscaiato.

 Evitare luoghi soggetti ad alte temperature, umidità o contatto con l'acqua.

 Non installare il prodotto vicino a prese d'aria o aree con polvere e fumi in eccesso.

 Installare solo su pareti verticali ed evitare superfici inclinate.

 Non installare in luoghi soggetti a urti o vibrazioni.

 - Non installaria in luoghi soggetti a sposizione diretta a luce intensa, in quanto potrebbe causare affaticamento degli occhi durante la visualizzazione del pannello del display. Mantenere uno spazio sufficiente attorno al display per garantire un'adeguata ventilazione. Il programme un'assistanti programme un'assist
- La superficie, la parete, il soffitto o il pavimento devono essere sufficientemente robusti da sostenere un peso di almeno quattro volte il display e il prodotto combinati. La posizione di montaggio deve essere in grado 5. Let a provide the substitute of the substitut

- 13. Poiché il produttore non può verificare / supervisionare la qualità della superficie / parete, soffitto o pavimento né la qualità dell'installazione del prodotto, la garanzia del prodotto copre solo il prodotto stesso, non il funzionamento di prodotto. Il periodo di garanzia del prodotto e di 5 anni. il funzionamento di manuale in iniqua in giese per qualsiasi controversia relativa alle condizioni.

ES /!\ PRECAUCIÓN

- Para garantizar su seguridad, lea este manual cuidadosamente antes de la instalación y siga las instrucciones. Conserve este manual en un lugar seguro para futuras consultas.
 El fabricante no será legalmente responsible de ningún daño producidos obser el equipo o leafon personal causada por una instalación o uso no mencionado explicitamente en este manual.
 El soporte está diseñado para una rácili instalación y extracción. El fabricante no será responsable por daños al equipo o lesiones personales que surjan de factores humanos o actos de la naturaleza, como terremotos
- o tifones
- Se recomienda que el soporte sea instalado solo por personal cualificado. Para evitar que se caiga el producto, la instalación o retirada deberá ser realizada por al menos dos pers Inspeccione detenidamente el área donde se instalará el soporte:
- Estre los lugares sometidos a late temperaturas, humedad o control est.

 No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.

 No instale el producto cerca de ventiladores de aire acondicionado o áreas con exceso de polvo y humos.

 No instale en lugares sujetos a golpes o vibraciones. - No instale en lugares sometidos a la exposición directa a la luz brillante, ya que puede causar fatiga ocular al ver el panel de la pantalla

- Mantenga sufficiente espacio al inededior de la pantialla para asegurar una ventilación adecuada.
 Para garantizar una instalación segura, primero verifique le estructura de la pared, el techo o el piso y seleccione una ubicación de montaje segura.
 La pared, el techo o el piso deben ser lo sufficientemente fuertes para sostener un peso sostener o otro golpe fuerte
- 10. No modifique ningún accesorio ni utilice componentes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor si tiene alguna duda.

 11. Apriete todos los tormillos (no ejerza demasiada fuerza para evitar que se roma el tormillo se o dañe la rosca).

 12. Mantenga los orificios y los permos en la pared, techo o suelo después de retirar la pantalla y el soporte. Podrían quedar manchas después de un uso prolongado.
- 13. Dado que el fabricante no tiene forma de controlar el tipo de pared, techo o piso y la instalación del soporte, la garantía del producto solo cubrirá el cuerpo del soporte. El periodo de garantía del producto es de 5 años 14. Consulte el manual en inglés si tiene alguna dudica acerca de las condiciones.