

Das REAPLAN-HERZBRETT



▶ Heute wird es in mehr als tausend Kliniken und den meisten Universitäts-Kliniken eingesetzt.

**Wenn es um Sekunden geht ...
Ist das REAPLAN-HERZBRETT lebensrettend!**

Immer noch bestehen viele Unterlagen zur extrathorakalen Herzmassage aus harten Spanplatten oder Holz. Manche sind, obwohl dafür entwickelt, so stark ausgeformt, dass das Einschieben ohne die Hilfe einer zweiten Person kaum möglich ist. Materialbedingt ist zudem eine vorschriftsmäßige Desinfektion meist schwierig.

Das in Zusammenarbeit mit Intensivmedizinern entwickelte REAPLAN-HERZBRETT aus Polyethylen ist ein leichter, stabiler Hohlkörper. Dank integrierter Handgriffe und einer hervorragenden Gleitfähigkeit kann es von einer Person leicht unter den Patienten geschoben werden.

Eine spezielle Wandhalterung mit der Aufschrift REANIMATION sichert auf allen Stationen schnellste Verfügbarkeit.

MERKMALE:

- **Blitzschnelle Verfügbarkeit durch auffällige Wandhalterung**
- **Geringes Gewicht**
- **Röntgendurchlässigkeit**
- **Minimierung von Frakturen durch nachgebendes Material**
- **Absolute Stabilität durch hochwertiges Polyethylen**
- **Belastungstest 200 kg**
- **Zuverlässige Desinfektion durch eine porenfreie Oberfläche**

REAPLAN- REANIMATIONSPLATTE

Ein Herzbrett, wie es sein muss:


Leicht und bruchsicher, ohne Rippen und Kanten. Ein innenverstärkter Hohlkörper aus Polyethylen, in der Fläche druckresistent, jedoch punktuell nachgebend. Die stützenden Verbindungen wurden in die Unterschale eingeformt, sodass der Patient auf einer glatten und kantenfreien Fläche liegt.

Vier Handgriffe und der glatte, strukturfreie Kunststoff erleichtern das Einschieben vor und das Umbetten nach der Reanimation. Das porenfreie Material sichert eine zuverlässige Desinfektion. Verjüngungen in den beiden Griffbereichen erlauben ein besseres Untergreifen.

Notfallmanagement

Der Qualitätsbericht Ihrer Klinik weist sicher ein zertifiziertes Verfahren zum Notfallmanagement aus. Die Präsenz der REAPLAN-Platte verbessert die Chancen einer Cardiopulmonalen Wiederbelebung ohne Sternum- und Rippenserienfrakturen. Daher sollte auf allen Stationen eine REAPLAN-Platte griffbereit sein.

BELASTUNGSPRÜFUNG 200 kg

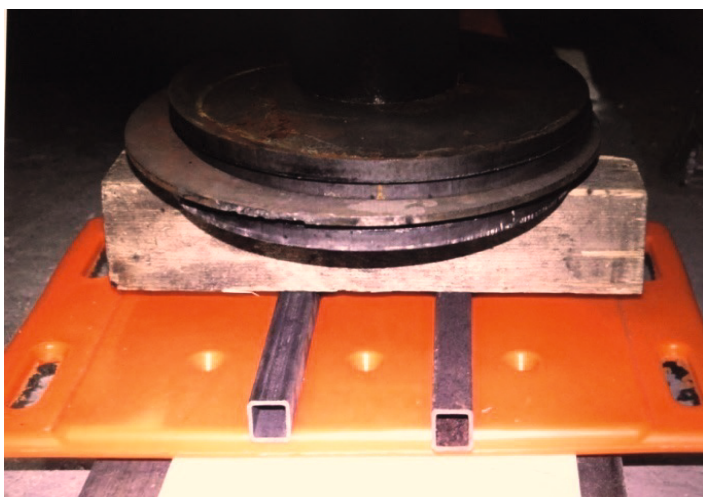

Im Notfall nicht zu übersehen:

Die mit der Wand verschraubte Aufhängung und das Herzbrett passen formschlüssig ineinander. Auffallend durch den Schriftzug REANIMATION ist es blitzschnell zur Hand. Dies alles erlaubt die sofortige Einleitung der Herzmassage unter optimalen Bedingungen.



REAPLAN
Postfach 1768 | D-67327 Speyer

Mail: info@reaplan.de
Tel.: 06344 5752
Fax: 06344 2415

REAPLAN – HERZBRETT
CE - Zertifiziert

Größe: 800x500x28 mm
Gewicht: 3200 Gramm
Farbe: Notfall-Orange