



ihle®

Start

Strümpfe & Textilien

Diabetes & Problemfuß

Unterwäsche

Prothetic & Orthetic

Alltag & Sport

Produktdetails

Fachhandel

Über uns


Kontakt



Nahtlose medizinische Funktionsgestricke.

Made in Germany.

Strumpfformen

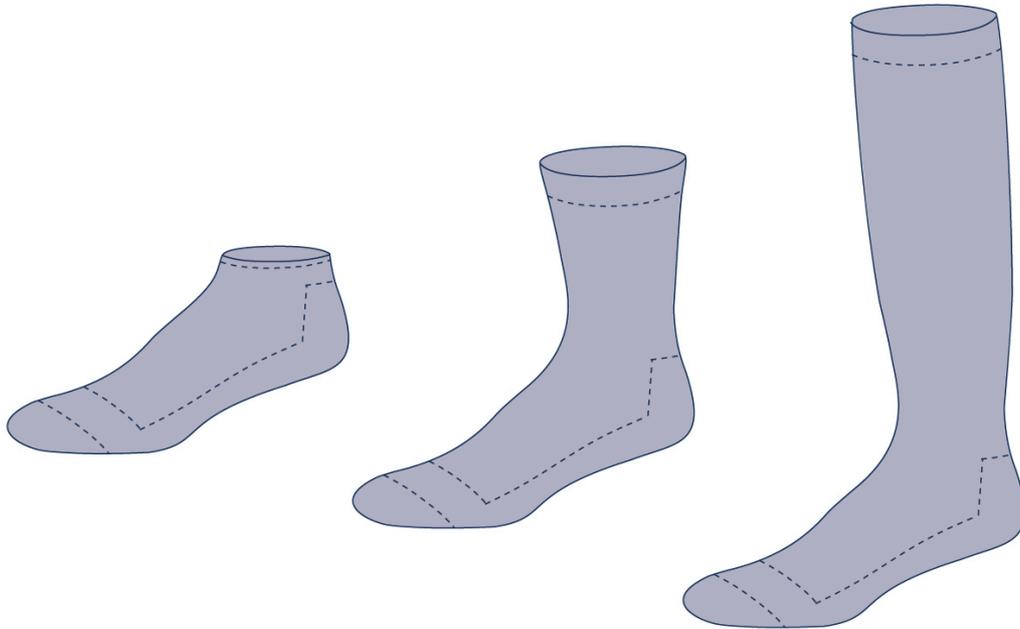

Füßling

Kurzsocke

Kniestrumpf

Strumpf und Schuh = passt.

Wärme im Winter, Komfort und Hygiene im Sommer: Mit steigenden Temperaturen ändert sich auch der Griff in die Sockenschublade. Darauf hat **ihle**® sein Produktportfolio abgestimmt und fertigt Strümpfe in drei verschiedenen Ausführungen.

Kurzsocke

Allrounder für alle Jahreszeiten: Form- und namensgebend für die Socke ist das Beinstück. Bei der Kurzsocke reicht es ca. 10 cm über das Sprunggelenk bis max. zur Wadenmitte. Als Bündchen kann ein Umhängerand ohne Gummi, Ripprand (mit und ohne Gummi) gefertigt werden.

Kniestrumpf

Klassiker für den Winter oder hohes Schuhwerk: Der Strumpf endet unter dem Knie. Ein breites Bündchen gibt Halt und engt nicht ein. Ränder mit und ohne Gummi stehen auch hier zur Auswahl.

Füßling

Die Sommerversion des Strumpfes kleidet primär Zehen und Ferse. Der Füßling schließt kurz oberhalb bzw. unterhalb des Knöchels ab. Für Diabetiker empfehlen wir daher die längeren Versionen unserer Strümpfe.

Gestrick

Entscheidend für Tragegefühl und die Optik ist nicht nur das verwendete Material, sondern die sogenannte Teilung (engl. Gauge). Damit ist die Anzahl der Nadeln gemeint, mit denen auf einem Zoll (2,54 cm) gestrickt wird. Üblich ist eine Teilung von 14 Maschen/ Zoll, welches das klassische Maschenbild ergibt. **ihle**® nutzt die Bandbreite von 6 bis zu 36 Maschen/ Zoll. Das Ergebnis ist immer eine den Ansprüchen passende Strickware.



Klassisch glatt

Das gleichmäßige Gestrick in mittlerer Dicke ist ein Generalist. Es passt zu jeder Saison, jedem Anlass und Männern wie Frauen. **ihle**® fertigt daraus alltagstaugliche Socken und Strümpfe.



Klassisch extra fein

Damit bezeichnet **ihle**® die veredelte Version klassischer Strickware. Für dieses Gestrick kommen 22 Maschen auf einem Zoll. In Mitteleuropa bevorzugen meist Damen, in Südeuropa vermehrt Herren, diese Qualität.



Vollpolsternd

Von der Zehe bis zum Rand: Vollgepolsterte Strümpfe garantieren durch den Frotteestrick angenehme Wärme, effektive Dämpfung und gute Luftzirkulation. Sie sind für verschiedene Aktivitäten geeignet.



Halbplüsch

Polsterung an ausgewählten Partien: Mitunter reicht es, wenn Zehen, Sohle und Fersenbereich besonders unterlegt sind. Daher gelten Halbplüsch-Modelle als ideale Begleiter für die Übergangszeit.

Farben

Es wird bunt im Schuhwerk: Dieser Trend setzt sich auch in orthopädischen Schuhen durch. Ob zurückhaltendes Anthrazit, meliertes Jeansblau oder kräftiges Rot – **ihle**® produziert explizit in einer breiten Farbpalette. Wir verstricken Wohlfühlaspekte und textiles Knowhow zu einem modischen, funktionellen Accessoire.

schwarz

marine

grau

anthrazit

graphit

braun

weiß

silber

beige

natur

perle

beige meliert

jeansblau meliert

hellgrau meliert

dunkelgrau meliert

gelb

rot

grün

rosa


lila

türkis


königsblau

Bündchen


Umhängerand ohne jeglichen Gummi

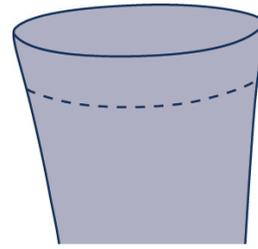

Langer Ripprand mit leichtem Gummi

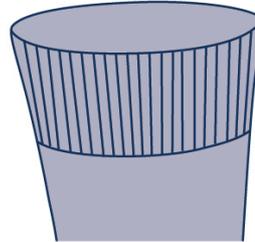

Ripprand mit leichtem Gummi für schmale Fesseln

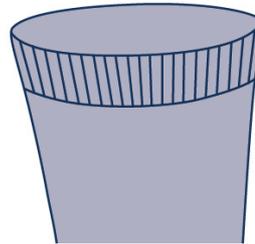

Super Passform ohne Einschneiden: Dehnbar, anschmiegsam und alltagsfit – so muss das Gestrick sitzen. **ihle**® hat darum verschiedene Ränder bzw. Bundformen entwickelt. Das Spektrum reicht von schmal bis extraweit. Folgende Ausführungen bieten wir an:

Umhängerand ohne Gummi

Mit diesem speziellen Gestrick kommt **ihle**® primär den Bedürfnissen von Diabetikern nach. Doch auch jeder, welcher einschneidenden Gummi als störend empfindet, ist mit dem Umhängerand gut beraten.

Ripprand ohne Gummi

Dieser Rand ist etwa 10 cm lang und kann auch als Umschlagvariante getragen werden.

Ripprand mit Gummi

Hier wird auf 4 cm Länge ein Gummi mit eingestrickt. Das gewisse Etwas an spürbarem Halt bevorzugen meist Kunden mit gesunden Füßen. Gut zu wissen: Für Diabetiker ist diese Art des Randes nicht geeignet.

Materialien

Baumwolle, Angora oder SENSICO®?

Hauptsache Qualität!

Damit **ihle**®-Produkte halten, was sie versprechen, müssen sie gewisse Härte-tests bestehen. Welches Material verstrickt wird, richtet sich allein nach den Bedürfnissen des Trägers.

Baumwolle

Robust, strapazierfähig und atmungsaktiv: Baumwolle nimmt gut die Feuchtigkeit auf und hält vielen Wäschen stand. Gut zu wissen: Wer starke Schweißfüße hat, sollte Socken aus SENSICO® wählen.



Schurwolle

Perfekt bei kalten Füßen: Schurwolle bietet hervorragenden Kälteschutz, gleicht Temperaturen aus und wirkt wie ein Luftpolster (kann bis zu 50% des Eigengewichts an Luft speichern). Unser Tipp: Dieses Material ist bestens für Rheumatiker geeignet.

Angora

Flauschige Faser mit Klimaautomatik: Angorawolle arbeitet temperatenausgleichend und regulierend. Zugleich nimmt sie Feuchtigkeit auf (bis zu 60% ihres Eigengewichtes); gibt diese Schritt für Schritt nach außen ab. Wichtig: Rheumatiker schätzen dieses Material und den Tragekomfort.

Silber

Entzündungshemmend und antibakteriell: Silber wird als zuverlässiges Material in der Behandlung von Wunden und Infektionen geschätzt. **ihle**® nutzt die Eigenschaften der Silberfasern, um Heilung zu fördern und Fußgerüche (durch Bakterien) zu reduzieren.

SENSICO®

Der Fasermix für das besondere Wohlgefühl: 80% Baumwolle und 20% Lyocell – das ist SENSICO®. Diese Kombi entzieht Bakterien und unangenehmen Gerüchen den Nährboden. Wer stark an den Füßen schwitzt, sollte Socken aus SENSICO® tragen.

Polyamid / Polyester

Ein Muss im Sport: Strümpfe und Socken mit Polyamid/ Polyester-Anteil trocknen schnell, sind enorm strapazierfähig und formstabil. Die weichen Kunstfasern leiten aufgrund ihrer Struktur die Feuchtigkeit immer nach außen. **ihle**® Alltag- und Sport-Produkte sind in einer großen, bunten Farbpalette erhältlich.

Impressum

Datenschutz

AGB

Ihle Strumpf GmbH
Reuterweg 1
Gewerbepark Heinzebank
D-09429 Wolkenstein
Telefon: +49 37369 84690
Fax: +49 37369 846919
E-Mail: info@ihle-strumpf.de

Öffnungszeiten Werksverkauf

Montag bis Freitag: 8.00 bis 15.00 Uhr

