

DIE NEUE LumboTrain®

**Aktivierung, Entlastung
und Stabilisierung der
Lendenwirbelsäule**



Produktinformationen schnell digital verfügbar
mit der Bauerfeind Hilfsmittel-App
bauerfeind.de/himi-app

NEU

ZWECKBESTIMMUNG

Aktivbandage zur Unterstützung der Rückenmuskulatur bei Beschwerden im Lendenwirbelbereich

HILFSMITTELNUMMER

23.14.03.2011 straight (gerader Schnitt)
23.14.03.2012 waisted (taillierter Schnitt)

INDIKATIONEN*

- + allgemeine Schmerzzustände im LWS-Bereich (akut und chronisch)
- + degenerative Erkrankungen der Lendenwirbelsäule, z.B. Osteochondrose, Spondylarthrose, lumbale Deformitäten Spondylolysen ohne Wirbelgleiten
- + Zustand nach Prolaps und Protrusion (konservativ / postoperativ)
- + Zustand nach Diskektomie

IN STUDIE^A BELEGT

- + **bis zu 21 % mehr Rückenmuskelaktivität nach drei Wochen Tragezeit**
- + **bis zu 69 % weniger Schmerzen**

FUNKTIONSELEMENTE



lumbale Pelotte mit flexiblen Noppen



individuell positionierbare Pelotte unterstützt eine gezielte Wirkung



praktische Hand-schlaufen für leichtes An- / Ablegen




perforierter Verschluss und große Zwischenräume im Gestrick für hohe Atmungsaktivität



in zwei Ausführungen erhältlich: straight (gerader Schnitt) und waisted (taillierter Schnitt)

* Eine vollständige Übersicht aller Indikationen, Kontra-Indikationen und wichtige ergänzende Hinweise finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

^A Anders C, Hübner A., PLOS ONE 2019;14(1): e0211042. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211042>

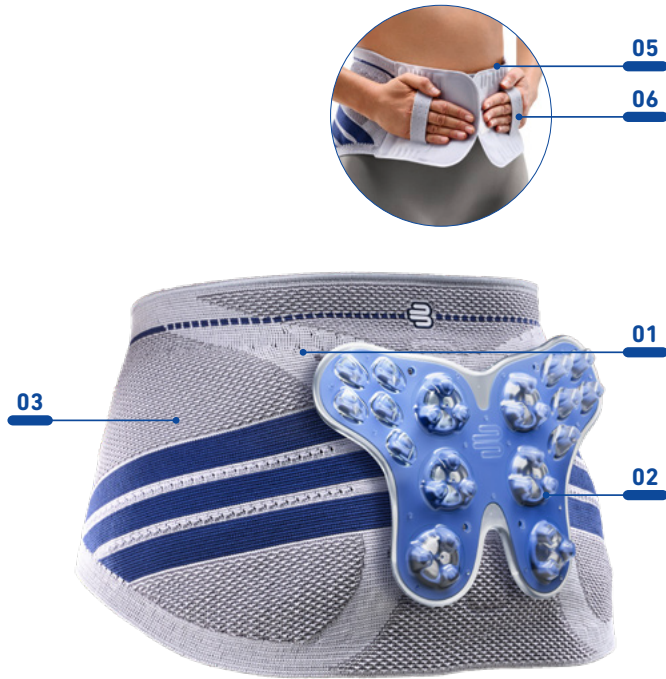

01. **Schmerzlindernde Wechseldruckmassage** durch Zusammenspiel von stimulierendem Gestrick und lumbaler Pelotte mit ausgeprägten Friktionsnoppen
02. **Lumbale Entlastung und Stabilisierung** durch lumbale Pelotte, welche der manuellen Therapie des Physiotherapeuten nachempfunden ist
03. **Spezielles Hoch-Tief-Gestrick** mit atmungsaktiven Komfortzonen vergrößert den Hautkontakt für positionssicheren Sitz und eine flächendeckende Stimulation körpereigener Stabilisierungsprozesse
05. **Gefiederter Rand am Bauchverschluss** für angenehmes Tragegefühl beim Laufen, Stehen und Sitzen
06. **Praktische Handschlaufen und hohe Dehnbarkeit** für leichtes, kraftsparendes Anlegen und ideales Anschmiegen an die Körperkontur

Abbildungen nur zu Illustrationszwecken. Korrekte Position und Wirkrichtung der Pelotte, siehe Gebrauchsanweisung!

DAS BAUERFEIND PLUS FÜR IHR SANITÄTSHAUS

- + Pelotte mit verbesserter medizinischer Wirksamkeit
- + einfache Handhabung
- + hautfreundlich und atmungsaktiv mit Train-Gestrick
- + digital vermessbar
- + ergänzende Therapiebegleitung mit der Therapie-App


BESTELLOPTIONEN

Ausführung: in gerader und taillierter Version erhältlich

Farbe: titan

Größe	1	2	3	4	5	6	7	Artikel-Nr.
Leibumfang (cm)	70–80	80–90	90–100	100–110	110–120	120–130	130–145	110 841# 60800°

= Ausführung (0) straight, (1) waisted
° = Größe (1–7)

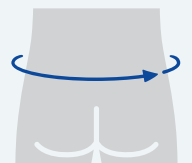

LIEFERUMFANG

Lumbalbandage inkl. Noppenpelotte

WEITERE ANGABEN

Verpackung: 260 × 230 × 45 mm

Gesamtgewicht: 549 g

Produktkatalogseite, Folder und weitere Informationen* finden Sie unter experts.bauerfeind.com/lumbotrain



* Vollständige Produktinformationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Haftungshinweise Alle Angaben dieser Broschüre haben den Stand des Zeitpunkts der Drucklegung. Sämtliche Inhalte dieser Broschüre / Online-Darstellungen (Texte, Bilder, Grafiken etc.) verstehen sich allein als Ergänzung des Rates Ihres Fachpersonals, insbesondere des behandelnden Arztes oder Physiotherapeuten. Die Broschüre soll diesen medizinischen Rat nicht ersetzen. Es wird strengstens empfohlen, vor Einsatz eines Bauerfeind-Produkts oder Übernahme einer Therapieempfehlung ärztlichen Rat einzuholen und von den ärztlich gegebenen Anweisungen / Therapien nicht abzuweichen. Nur dann ist die bestmögliche Wirkung unserer Produkte sichergestellt und Sie werden schnell wieder gesund. Unsere Ausführungen sollen Selbstdiagnose oder Selbstmedikation nicht unterstützen oder fördern, sondern dienen lediglich der allgemeinen Erst-Information und Grundsensibilisierung für die angesprochenen Themen.